

Alma X PROLLENIUM®

REVANESSE®

DAS ERLEBNIS DER ÄSTHETIK
NEU GESTALTEN

DIE ZUKUNFT DER ÄSTHETIK **ZUSAMMEN** NEU GESTALTEN

Almas Weg war schon immer geprägt von ständiger Weiterentwicklung, Partnerschaften und einem tief verwurzelten Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger, fortschrittlicher technologischer Lösungen, die die Herzen unzähliger Kunden auf der ganzen Welt erobert haben.

Die Partnerschaft: Alma X PROLLENIUM

Zwei führende Unternehmen der Ästhetikbranche schließen sich zusammen. Beide stehen für Innovation, Exzellenz und das Streben nach einer Verbesserung des Wohlbefindens der Kunden.

Diese Partnerschaft stellt einen bahnbrechenden Meilenstein dar, indem sie Almas preisgekrönte Expertise im Bereich energiebasierter Systeme mit Prolleniums Pionierleistungen im Bereich Hyaluronsäure-Filler verbindet. Gemeinsam setzen sie neue Maßstäbe in der Branche, getragen von einem gemeinsamen Engagement für Sicherheit, Effektivität und dem Ziel, das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern. Diese Partnerschaft verspricht ganzheitliche Lösungen, die das Beste aus energiebasierten Technologien und bahnbrechenden injizierbaren Produkten vereinen und optimale Ergebnisse für Kunden und ihre Patienten gewährleisten.

Kundenorientiert und innovationsgetrieben

REVANESSE® by PROLLENIUM®

Die Kundenmeinung zählt!

Prollenium stellt seine Kunden in den Mittelpunkt und schätzt ihre Beiträge und Erkenntnisse. Prollenium fördert einen ständigen Dialog durch aktives Zuhören, Reagieren und Handeln!

Hergestellt in Kanada

REVANESSE® Dermalfiller werden vollständig in Kanada entwickelt und hergestellt. Erster Hersteller von Hyaluronsäure-Fillern in ganz Nordamerika.

FDA-zertifiziert

Prollenium wurde 2002 gegründet und ist eines der wenigen Unternehmen, die für ihre Produktionsstätten eine FDA-Zulassung erhalten haben.

Experten und Innovatoren für Dermalfiller

Das hauseigene Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet kontinuierlich an der Innovation und Verbesserung von Formulierungen und Technologien. So leidenschaftlich, wenn es um Dermalfiller geht, dass sie nichts anderes tun!

Wie wird REVANESSE® hergestellt?

01

REVANESSE® VERNETZT HOCHMOLEKULARE (HMW) HYALURONSÄURE (HA) MIT EINER MINIMALEN MENGE AN 1,4-BUTANDIOLDIGLYCIDYLETHER (BDDE). HMW HA ähnelt stark der körpereigenen Hyaluronsäure, benötigt weniger BDDE zur Stabilisierung und wird vom Immunsystem weniger wahrscheinlich als Fremdkörper erkannt.¹

02

DAS GEL DURCHLÄUFT EIN PROLLENIUM-EIGENES NASSMAHL-VERFAHREN, DAS GLATTE, KUGELFÖRMIGE PARTIKEL ERZEUGT. Kugelförmige Partikel haben in der Regel eine kleinere Oberfläche. Entzündungsreaktionen sind bei unregelmäßig geformten Partikeln oder solchen mit größerer Oberfläche stärker ausgeprägt.²

03


DURCH DIE ÄNDERUNG MEHRERER EIGENSCHAFTEN UNSERER HA-GELE WERDEN VERSCHIEDENE RHEOLOGIEN ERZIELT.

Durch verschiedene Vernetzungsgrade und Partikelgrößen passen wir unseren Ansatz an spezifische Indikationen an und fügen bei Bedarf lineares HA hinzu. Aufgrund dieses hohen Anpassungsgrads sind wir in der Lage, spezifische Eigenschaften für bestimmte Indikationen zu erzeugen.

04

OPTIMIERTE DIALYSEREINIGUNG FÜR EINE GRÜNDLICHE ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEM BDDE UND TOXINEN.

Unsere einzigartige Dialysereinigung über sieben Tage erzeugt ein reineres Produkt mit neutralisiertem pH-Wert und ausgeglichener Osmolalität. Dieser Schritt gewährleistet, dass Sie genau das bekommen, was Sie sehen. Dafür sind wir bekannt.

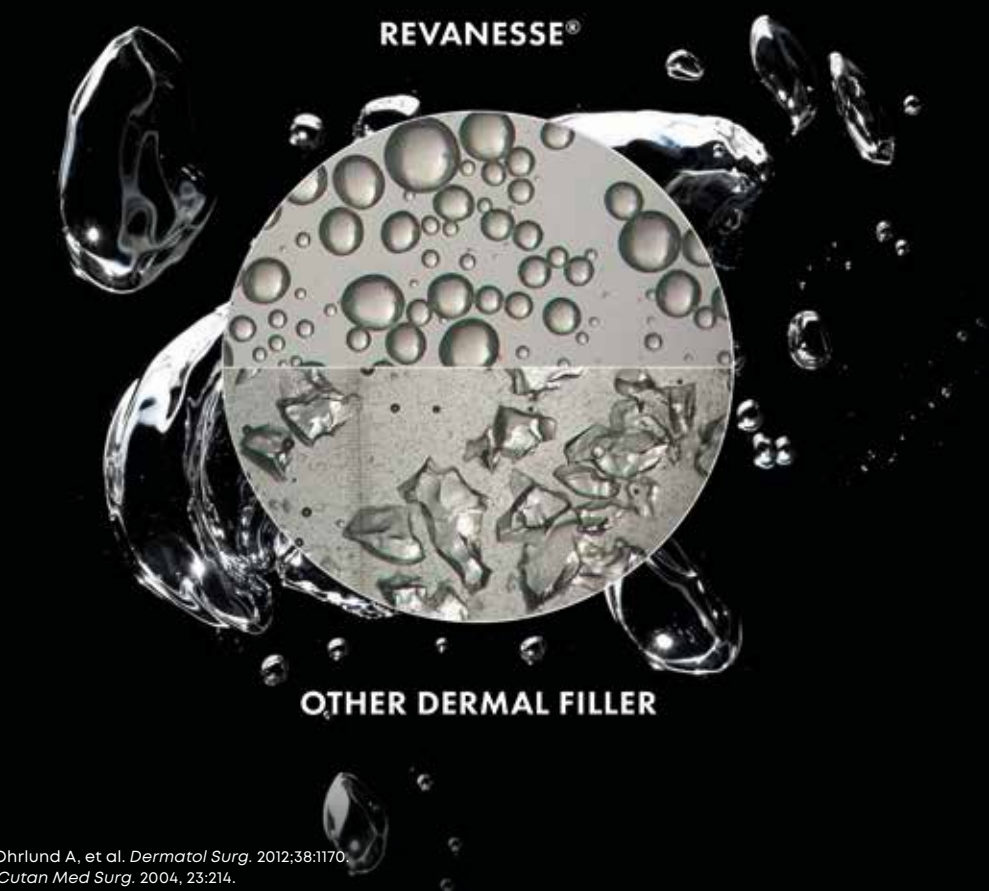

1. Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, et al. *Dermatol Surg.* 2012;38:1170.
2. Laeschke K. *Semin Cutan Med Surg.* 2004, 23:214.


Entwickelt für **geringere Schwellungen und weniger Schmerzen**

Glatte, kugelförmige und gleichmäßige HA-Partikel

Glatte und kugelförmige Partikel fördern eine bessere Gewebeintegration und können Entzündungsreaktionen reduzieren.²



VERGLEICHSPRÄ-
PARAT A

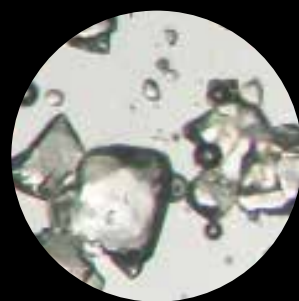

VERGLEICHSPRÄ-
PARAT B



REVANESSE® ULTRA™




VERGLEICHSPRÄ-
PARAT C




VERGLEICHSPRÄ-
PARAT D

In einer direkten klinischen Vergleichsstudie berichteten mehr Probanden, die mit Restylane® behandelt wurden, über Schmerzen an der Injektionsstelle als Probanden, die mit Revanesse® Ultra™ behandelt wurden. Ähnliche Ergebnisse wurden bei Schwellungen beobachtet, wobei mehr mit Restylane® behandelte Probanden über Schwellungen an der Injektionsstelle berichteten als Probanden, die mit Revanesse® Ultra™³ behandelt wurden.

Anteil der Probanden,
die über Schmerzen an
der Injektionsstelle berichten*

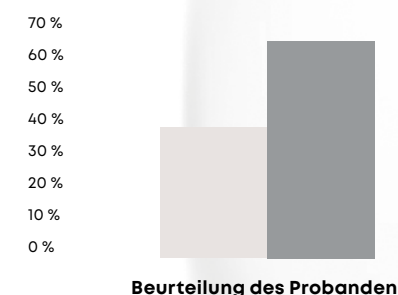

Anteil der Probanden,
die über Schwellungen an
der Injektionsstelle berichten*

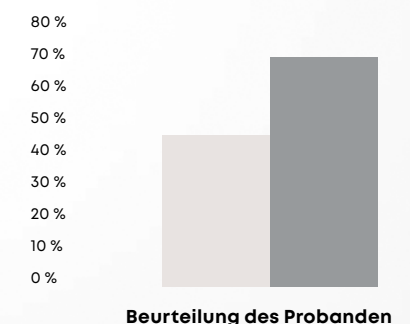

● Restylane® (N=163)* ● Ultra™ (N=163)*

2. Laeschke K. *Semin Cutan Med Surg.* 2004; 23:214.

3. Gold MH, Baumann LS, Clark CP III, Schlessinger J. *J Drugs Dermatol.* 01. Jan. 2018;17(1):66

1,2 ml Spritzen bieten ein zusätzliches Volumen von

20 %
pro Spritze

Nutzen für den Patienten


Mehr Produkt = mehr Behandlungsmöglichkeiten, höhere Patientenzufriedenheit und langfristige Kundentreue.

Nutzen für den Behandler

Mehr Behandlungsmöglichkeiten, bessere Ergebnisse.

Wirtschaftlicher Nutzen

Hervorragende Ergebnisse bei maximaler Kosteneffizienz.

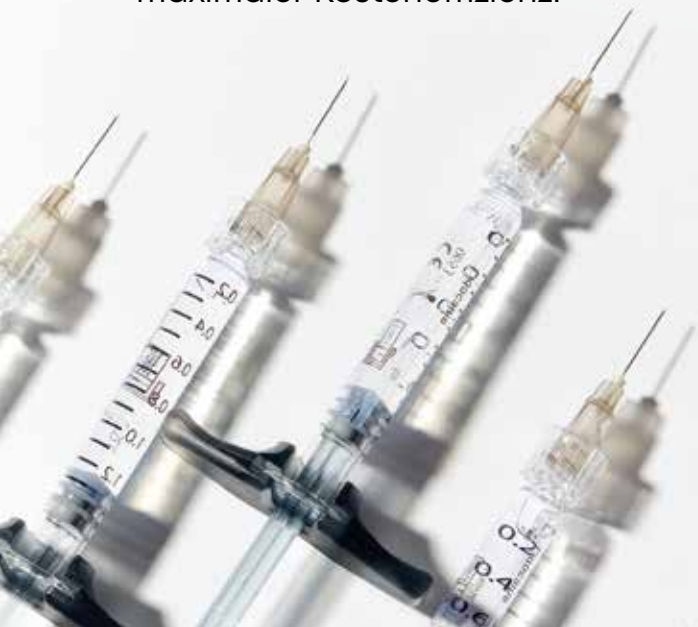

Eine umfassende Produktlinie, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

●● Stirnfalten

●○● Wangenknochen

●●● Periorale Linien

● Lippenrotgrenze & Philtralsäule

●● Lippen

● Augenbrauen

●●○ Schläfen*

● Tränenrinnen*

●● Nasolabialfalten

●● Submalar-Bereiche

●● Marionettenfalten

●○ Kieferpartie

●●○ Kinn

● PURE™+
Bio-Revitalisieren

● REVISE™+
Auffüllen & Verjüngen

● KISS™+
Auffrischen & Verjüngen

● ULTRA™+
Auffüllen & Volumisieren

● CONTOUR™+
Volumisieren & Formen

● OUTLINE™+
Strukturgeben & Liften

○ SHAPE™+
Aufbauen & Liften

Bitte beachten Sie, dass die Produktangaben in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein können. Die Auswahl des Behandlungsareals, der Injektionstiefe und des Produkts sollten auf Basis der Lage und Schwere der zu korrigierenden Vertiefungen und des gewünschten Korrekturgangs erfolgen. Injektionen mit Hyaluronsäure-Fillern sollten unter Einhaltung aller geltenden örtlichen Vorschriften nur von angemessen qualifizierten und geschulten medizinischen Fachkräften unter Aufsicht von qualifizierten, in den entsprechenden Injektionstechniken geschulten Ärzten durchgeführt werden. Vollständige und detaillierte Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweisen entnehmen Sie bitte der lokalen Produktkennzeichnung.

* Bei Injektionen in Schläfen und Tränenrinnen ist aufgrund der dünnen Haut in diesen Bereichen besondere Vorsicht geboten.

REVANESSE® Produktlinie von HA-Dermalfillern

								
		REVANESSE PURE™+	REVANESSE REVISE™+	REVANESSE KISS™+	REVANESSE ULTRA™+	REVANESSE CONTOUR™+	REVANESSE OUTLINE™+	REVANESSE SHAPE™+
	HA-Konzentration	14 mg / ml	12 mg / ml	25 mg / ml	25 mg / ml	25 mg / ml	25 mg / ml	25 mg / ml
	Viskosität	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Partikelgröße¹	Nicht zutreffend	●	●	●	●	●	●
	Lifting-Kapazität²	Sehr niedrig	Niedrig	Niedrig	Mäßig	Mäßig/Hoch	Hoch	Sehr hoch
	Injektionstiefe	Oberflächliche Der- mis	Oberflächliche bis mittlere Dermis	Oberflächliche bis mittlere Dermis	Mittlere bis tiefe Dermis	Tiefe Dermis bis in die subkutanen Schichten	Tiefe Dermis bis in die subkutanen Schichten	Supraperiost
	Häufig behandelte Areale	Entstehende Linien	Tränenrinnen, Krä- henfüße und perio- rale Linien	Lippen & periorale Linien	Submalar-Bereiche, Nasolabialfalten, Marionettenfalten & Lippen	Wangen, Kinn, Schläfen	Lippenrotgrenze & Philtralsäule & Lippen	Wangen, Kieferpar- tie & Kinn
	Anzahl der Sprit- zen & Volumen	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml	2 x 1,2 ml
	Nadelgröße in der Packung	30G	30G	27G /30G*	27G	27G	27G/29G*	27G

*Die Produktverfügbarkeit kann je nach geografischem Standort und Region variieren.

1.Die künstlerische Darstellung der HA-Partikelgrößen entspricht nicht der tatsächlichen Größe eines HA-Partikels im entsprechenden Produkt.
2.Basierend auf den rheologischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften jedes Produkts.

Bitte beachten Sie, dass die Produktangaben in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein können. Die Auswahl des Behandlungsareals, der Injektionstiefe und des Produkts sollten auf Basis der Lage und Schwere der zu korrigierenden Vertiefungen und des gewünschten Korrekturgrads erfolgen. Injektionen mit Hyaluronsäure-Fillern sollten unter Einhaltung aller geltenden örtlichen Vorschriften nur von angemessen qualifizierten und geschulten medizinischen Fachkräften unter Aufsicht von qualifizierten, in den entsprechenden Injektionstechniken geschulten Ärzten durchgeführt werden. Vollständige und detaillierte Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweisen entnehmen Sie bitte der lokalen Produktkennzeichnung.

Alma X PROLLENIUM®

REVANESSE®



HA-Filler der nächsten Generation

7 einzigartige Formulierungen

Vertrieb durch:

Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99
E-Mail: info@alma-lasers.de

Hergestellt von:

Prollenium Medical Technologies
138 Industrial Pkwy N,
Aurora, ON L4G 4C3,
Kanada
E-Mail: international@prollemium.com
www.prollemium.com

PN99750 Rev00

www.alma-lasers.de

© 2024 Alma. Alle Rechte vorbehalten.
Alma und seine Firmenlogos sind Marken oder eingetragene
Marken von Alma. Produktspezifikationen können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

FOLGEN SIE ALMA



DE - based on PBPR07072402_01